

Eine Einbettkassette - viele Möglichkeiten


Sie haben die Wahl!

In pathologischen/histologischen Laboren ist die Arbeitsweise vielfältig und je nach Laborgröße stehen unterschiedliche Bedürfnisse im Vordergrund.


Als zuverlässiger Partner stellt die KABE-Labortechnik GmbH ihr umfangreiches Portfolio in diesem Bereich immer wieder auf den Prüfstand und passt es den gegebenen Veränderungen an um möglichst allen Anforderungen gerecht zu werden und die Kunden zufriedenzustellen.

Die optimierte Einbettkassette bietet die Möglichkeit, sie mit zwei Deckelvarianten zu kombinieren; der bereits bekannte Deckel wird weiterhin am Steg an der Rückseite der Kassette angeklipst, wohingegen der neue Deckel an der Vorderseite eingesteckt und nach hinten geklappt und verschlossen wird.

► **Besonderheit: Die Einbettkassetten sind mit geschlossenem Deckel am Band aufgefädelt.**

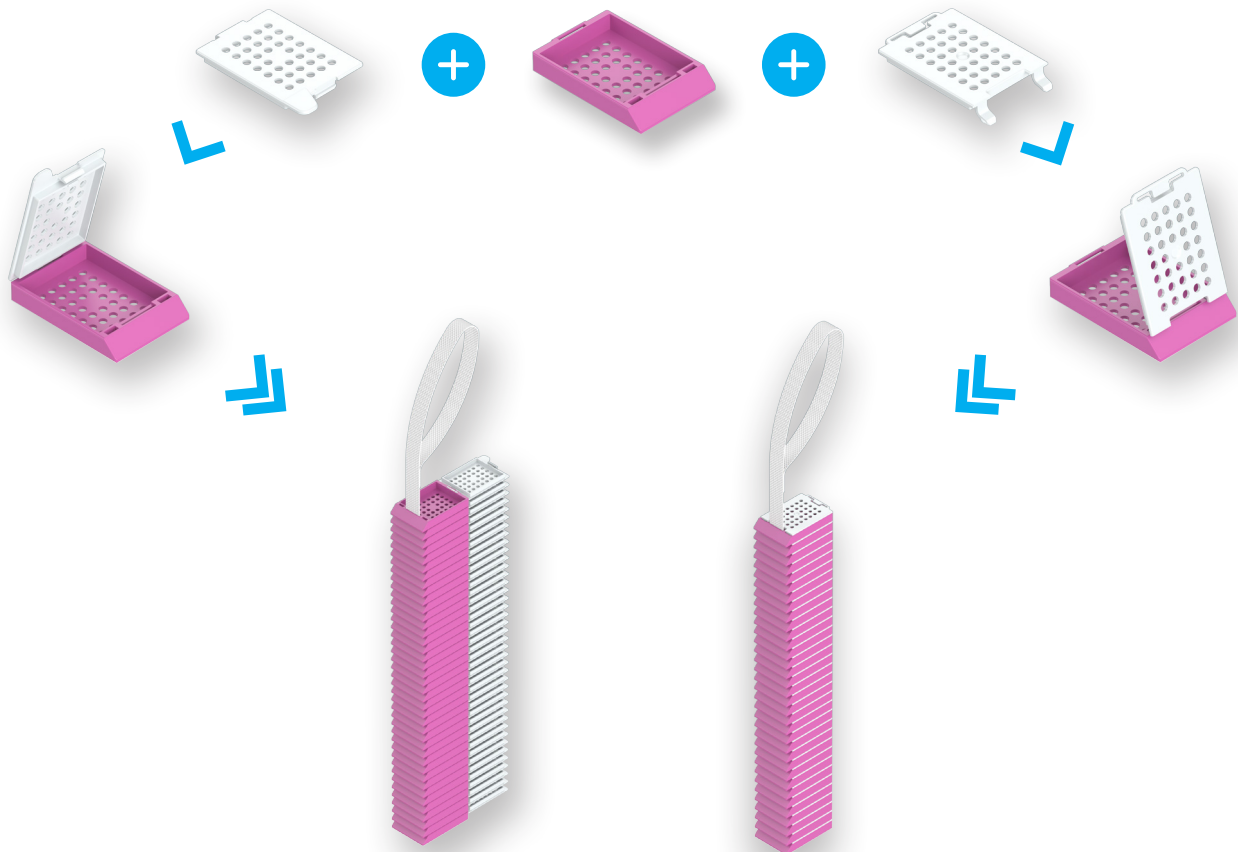

- » **Bewährte Verarbeitung:** Als gestapelte Variante am Band erhältlich, ist sie für gängige Drucker (z.B. Leica, Primera) geeignet
- » **Einfaches Schließen und Öffnen:** Der Deckel lässt sich fast 180° öffnen – ideal für ein optimales Eingießen der Probe

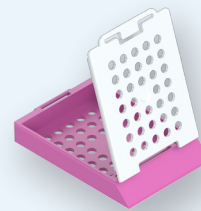





- » **Erweiterte Druckmöglichkeiten:** Dank der patentierten Stapelung im geschlossenen Zustand können auch Laserdrucker (z. B. Dakewe) problemlos bedient werden
- » **Vereinfachte manuelle Handhabung:** Sollte eine manuelle Deckelanbringung gewünscht sein, ermöglicht das Design ein intuitives und simples Einstecken

Gebrauchshinweis für die Einbettkassette mit Steckdeckel



Um das Öffnen des Deckels zu vereinfachen, wurde ein Federmechanismus integriert:
Die Lasche (s. Pfeil) mit dem Daumen nach innen drücken. Nun lässt sich der Deckel leicht öffnen.

				
	Einbettkassetten Standard	Einbettkassetten Universal	Einbettkassetten Biopsie	Einbettkassetten Bionet
mit geschlossenem Deckel am Band				
weiß	054200	054220	054240	054260
hellblau	054201	054221	054241	054261
gelb	054202	054222	054242	054262
rosa	054203	054223	054243	054263
hellgrün	054204	054224	054244	054264
hellorange	054205	054225	054245	054265
rot	054207	054227	054247	054267
grau	054208	054228	054248	054268
beige	054209	054229	054249	054269
hellviolett	054210	054230	054250	054270
türkis	054211	054231	054251	054271
dunkelorange	054212	054232	054252	054272
pastellgelb	054214	054234	054254	054274
pastellblau	054215	054235	054255	054275
pastellgrün	054216	054236	054256	054276

VE: 1.020 Stück im Spenderkarton (30 x 34 Stück), 3.060 Stück im Karton

Auch als Lasereinbettkassetten lieferbar - kontaktieren Sie uns einfach!



One embedding cassette – many possibilities

The choice is yours!


In pathological/histological laboratories, workflows are diverse, and depending on the size of the lab, different requirements take priority.

As a reliable partner, KABE-Labortechnik GmbH continuously reviews its extensive product portfolio in this area and adapts it to ongoing changes in order to meet as many requirements as possible and ensure customer satisfaction.


The optimized embedding cassette offers the option of combining it with two lid variants:

the already established lid continues to be clipped onto the bar at the back of the cassette, whereas the new lid is inserted at the front, then folded backward and closed.

▶ **Special feature: The embedding cassettes are threaded onto a strip with the lid closed.**

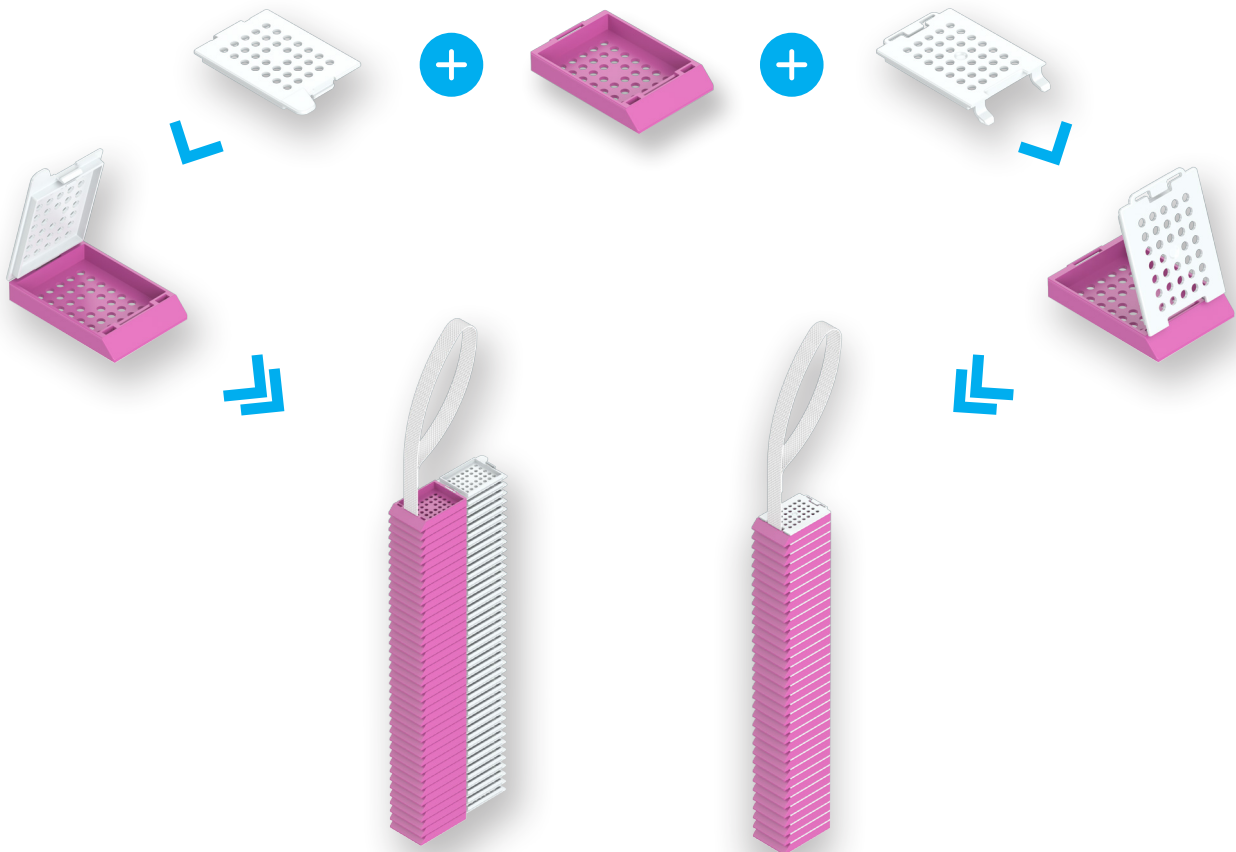

- ▶ **Proven processing:** Available as a stacked version on a strip, suitable for common printers (e.g., Leica, Primera)
- ▶ **Easy closing and opening:** The lid can be opened to almost 180° – ideal for optimal sample embedding

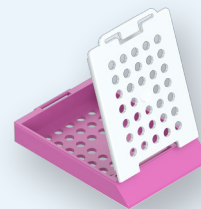





- ▶ **Extended printing options:** Thanks to the patented stacking in the closed state, laser printers (e.g., Dakewe) can also be used without issues
- ▶ **Simplified manual handling:** If manual lid attachment is desired, the design allows for intuitive and simple insertion

Information for use - embedding cassette with plug-in lid



To make opening the lid easier, a spring mechanism has been integrated:
Press the tab (see arrow) inward with your thumb. The lid can then be opened easily.

				
	Embedding cassettes Standard	Embedding cassettes Universal	Embedding cassettes Biopsy	Embedding cassettes Bionet
with closed lid on the strip				
white	054200	054220	054240	054260
light blue	054201	054221	054241	054261
yellow	054202	054222	054242	054262
pink	054203	054223	054243	054263
light green	054204	054224	054244	054264
light orange	054205	054225	054245	054265
red	054207	054227	054247	054267
grey	054208	054228	054248	054268
beige	054209	054229	054249	054269
light violet	054210	054230	054250	054270
turquoise	054211	054231	054251	054271
dark orange	054212	054232	054252	054272
pastel yellow	054214	054234	054254	054274
pastel blue	054215	054235	054255	054275
pastel green	054216	054236	054256	054276

Packaging unit: 1,020 pieces per dispenser carton (30 × 34 pieces), 3,060 pieces per box

Also available as laser embedding cassettes – just contact us!

